


Guide d'utilisation Orthanc/Ginkgo CADX

Dans ce tutoriel, vous y trouverez les différentes étapes afin de connecter **Orthanc** (PACS) à **Ginkgo CADX** (visualiseur d'image DICOM) afin de récupérer les images qui se trouvent dans Orthanc.

Tout d'abord vous pouvez trouver nos deux applications ici :

- <http://ginkgo-cadx.com/en/>: Ginkgo CADX
- <http://www.orthanc-server.com/download.php> : Orthanc


Une fois installées, il suffit de poster des images DICOM dans Orthanc.

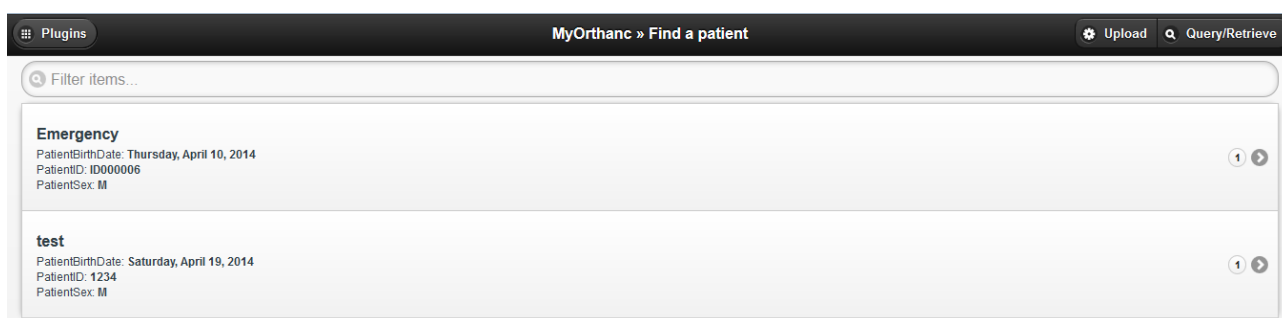


Img1. Voici deux images DICOMs qui ont été upload.

Les images sont maintenant dans la base d'Orthanc, il suffit alors de lancer Ginkgo CADX et de configurer celui-ci.

Allez dans l'onglet **Outil/Configuration/Nœuds DICOM** :

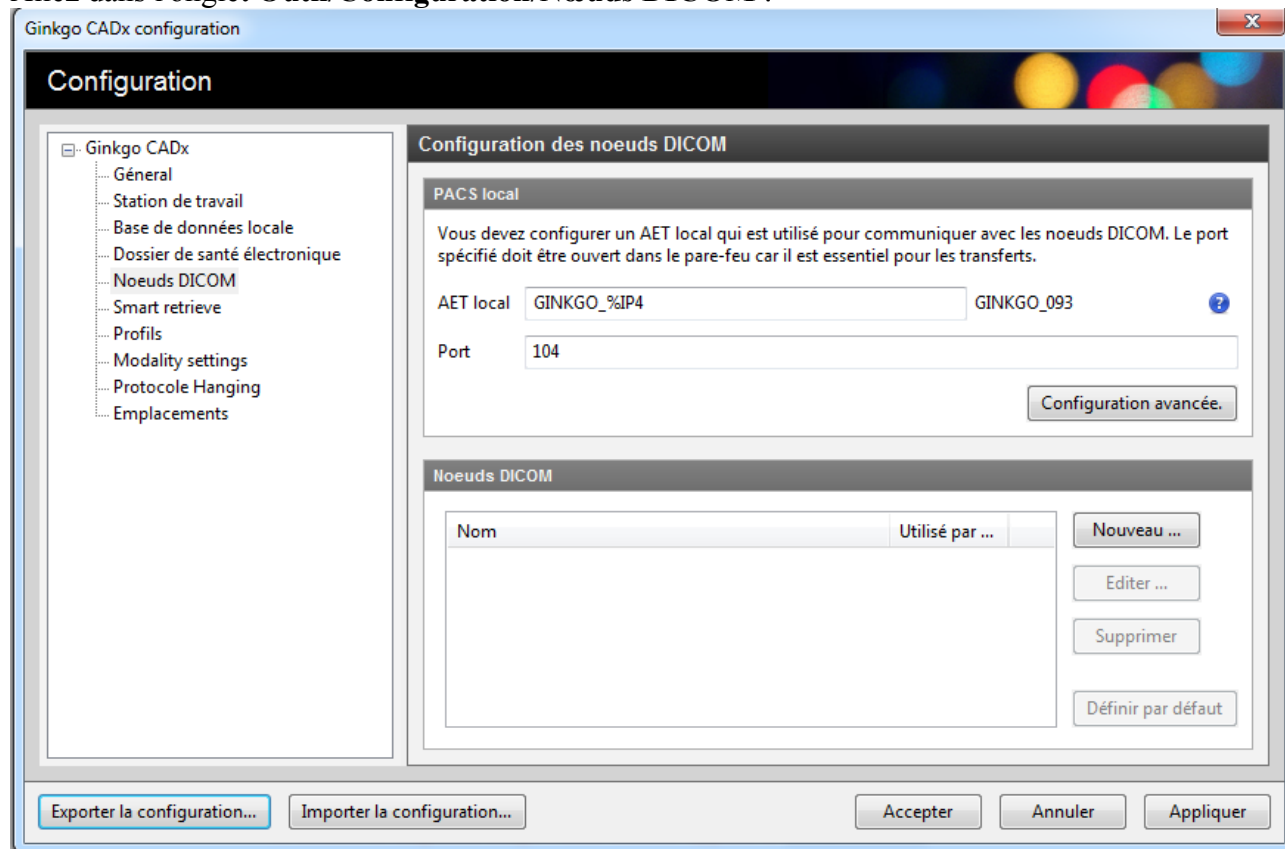

Faites **nouveau** et remplissez la fenêtre comme ceci (les informations se trouvent dans le fichier **Configuration.json** qui se trouve dans le dossier d'Orthanc) :

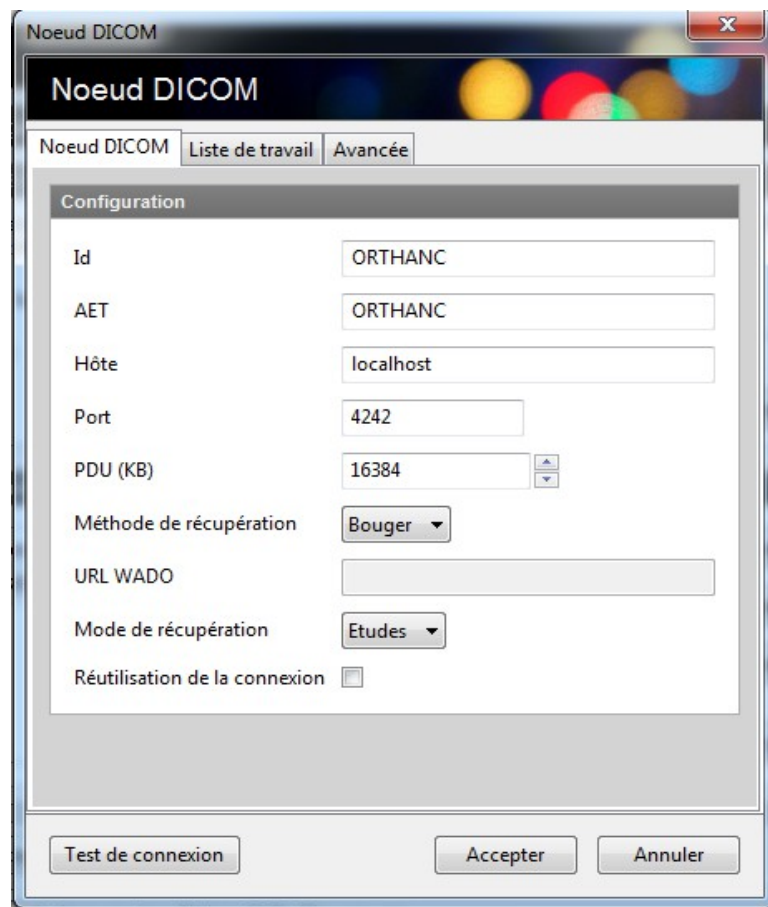


Configuration

Id	ORTHANC
AET	ORTHANC
Hôte	localhost
Port	4242
PDU (KB)	16384
Méthode de récupération	Bouger
URL WADO	
Mode de récupération	Etudes
Réutilisation de la connexion	<input type="checkbox"/>

Test de connexion Accepter Annuler

Faites Test de connexion, vous devriez obtenir ceci :

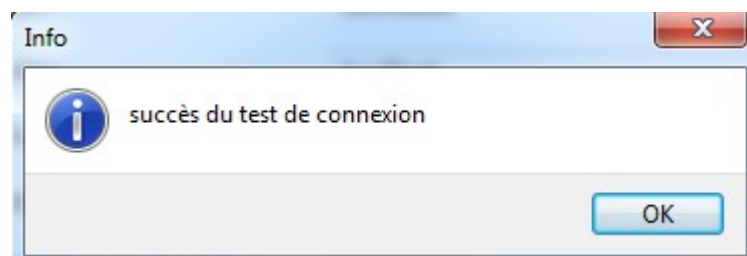

Sinon vous avez peut-être mal configuré vos paramètres.

Il vous reste maintenant plus qu'à ajouter une ligne dans le fichier **Configuration.json** d'Orthanc :

```
113     "DicomModalities" : {
114         /**
115          * Uncommenting the following line would enable Orthanc to
116          * connect to an instance of the "storescp" open-source DICOM
117          * store (shipped in the DCMTK distribution) started by the
118          * command line "storescp 2000".
119          */
120         // "sample" : [ "STORESCP", "localhost", 2000 ]
121
122         /**
123          * A fourth parameter is available to enable patches for a
124          * specific PACS manufacturer. The allowed values are currently
125          * "Generic" (default value), "StoreScp" (storescp tool from
126          * DCMTK), "ClearCanvas", "MedInria", "Dcm4Chee" and
127          * "SyngoVia". This parameter is case-sensitive.
128          */
129         // "clearcanvas" : [ "CLEARCANVAS", "192.168.1.1", 104, "ClearCanvas" ]
130         "ginkgocadx" : [ "GINKGO_093", "localhost", 104 ]
131     },
```

Redémarrez votre service Orthanc.

Vous pouvez maintenant utiliser Ginkgo CADX avec Orthanc.